



IV THERAPY  
Closed Needleless Connectors



閉鎖式ニードルレスコネクター

**bionector**

バイオネクター



Value Life

## ● ビオネクターの特徴と利点

### ● 流路内の容積が変動しません

陽圧式及び陰圧式コネクタの場合に必要なような、フラッシュ後の一連の特別なクランプ手順が必要ありません。

### ● 少ないプライミングボリューム


ビオネクターのプライミングボリュームは0.03mlです。

### ● 直線的な液体流路

液体流路が直線的であることから「フラッシュが可能」です。肉眼サイズの粒子及び顕微鏡サイズの粒子、たとえば血液をフラッシュによってデバイスから洗い流すことが可能です。

### ● 洗浄可能なメンブレン

ビオネクターには、デバイスのハウジングにぴったりと密着する、表面が滑らかで簡単に拭き取りを行えるメンブレンが使用されています。

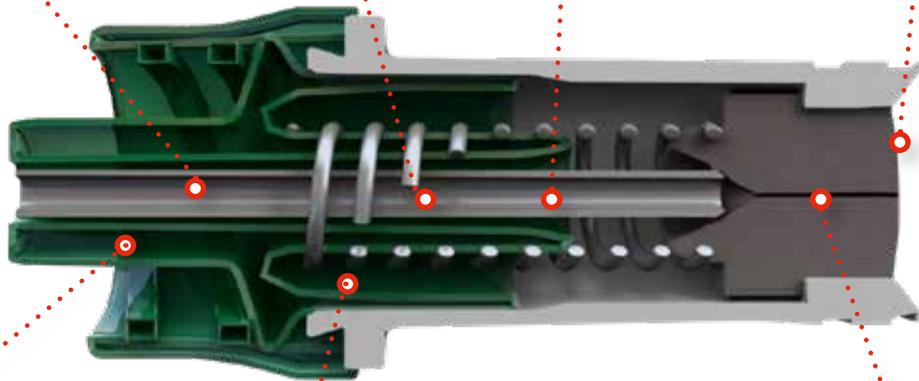

### ● MRI適合

3テスラ以下のMRIで使用できます。

### ● CT対応

造影剤注入器で使えます。  
最大圧力: 350 psi

### ● スプリットセプタム

スプリットセプタムを内蔵するニードルレスコネクタは、カテーテル関連血流感染の発生率が他のコネクタデザインに比べて低いことが証明されています。

製品名	製品コード	プライミングボリューム	販売単位
ビオネクター	896.03	0.03ml	50個/箱

医療機器認証番号: 226AMBZX00003000

製造販売元

株式会社ビゴン・ジャパン

大阪市北区中津1丁目15番15号 中津第2リッチビル3階

Tel. 06-5131-5300 Fax. 06-6131-5314



www.vygon.co.jp