

Closed Needleless I.V. Therapy
Connectors



閉鎖式ニードルレスコネクター

Autoflush

ビゴン
オートフラッシュ




Value Life

閉鎖式のニードルレスコネクタです。

- 金属針を必要とせず、輸液セットやシリンジなどのルアースリップアダプターやルアーロックアダプターを直接接続できます。
(針刺し防止)
- 専用のデバイスを必要としないので、接続時の手間や物品管理の煩雑さを軽減します。


ポジティブディスプレイメント（陽圧置換方式）

- ビゴン オートフラッシュは、シリンジなどの注入デバイスの接続を外したとき、陽圧がかかるため、カテーテル内への血液の引き込みを防止します。
陽圧ロック手技を簡単・確実に行うことが可能です。

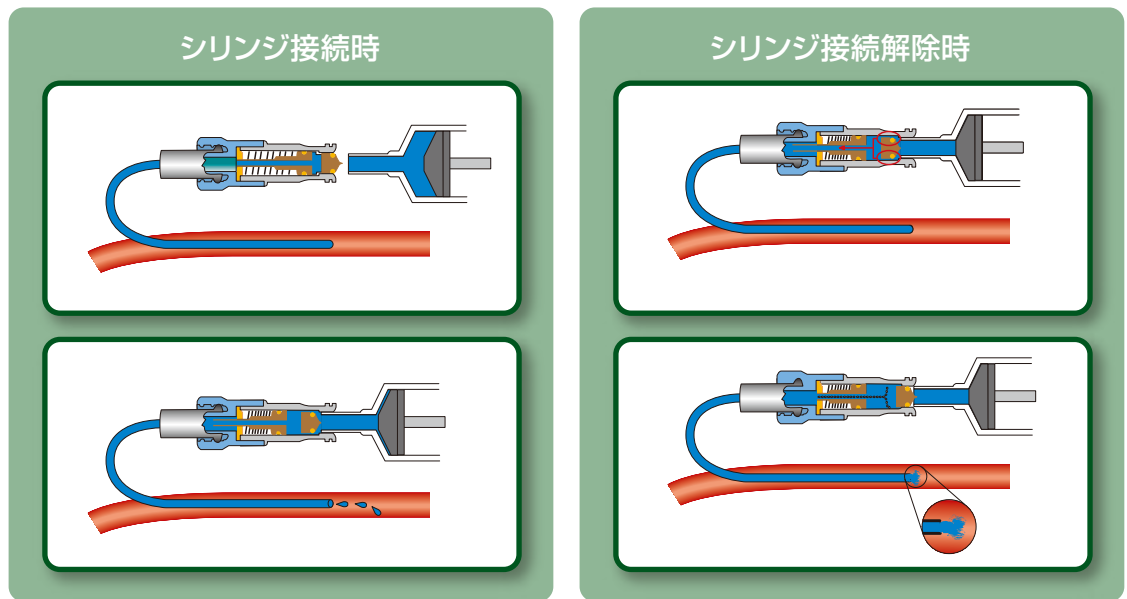

イメージ図

使用例

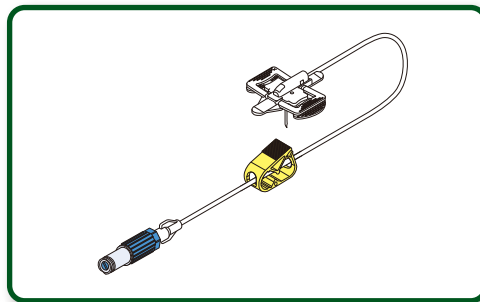

皮下埋込型ポート用フーバー針留置時の
陽圧ロック手技などに

製品名	製品コード	プライミングボリューム	フラッシュ液量	販売単位
ビゴン オートフラッシュ	5897.01	0.1 ml	0.03 ml	25個 / 箱

販売名：ビゴン オートフラッシュ
医療機器届出番号：27B1X00117000012

製造販売元

株式会社 ビゴン・ジャパン

大阪市北区中津1丁目15番15号 中津第2リッチビル3階
Tel. 06-6131-5300



www.vygon.com